
COVIData
Acompanha

Monitoramento e testagem da COVID-19 na comunidade UFABC

AUTO COLETA - Testagem COVID-19

1

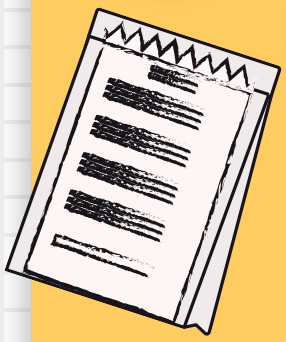

RETIRADA DO KIT

Você retirará um envelope lacrado contendo um kit para a coleta de saliva. Siga as instruções do guia de utilização.

2




LOCAL DE COLETA

Vá até o seu local de trabalho.
Higienize a superfície a ser utilizada na coleta com álcool 70% e lave bem as mãos.

3

O KIT

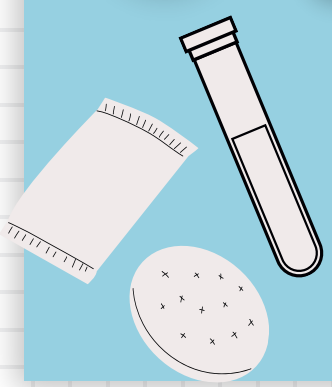

O envelope contém:
- 01 tubo de coleta
- 02 algodões em um saquinho
- 02 lenços com álcool 70%
- 01 par de luvas descartáveis
- 01 envelope novo
- 01 questionário

Todos os materiais são esterilizados.

4




QUESTIONÁRIO

Preencha, com letra legível e de forma, todos os dados solicitados sobre identificação pessoal, sintomatologia e informações relacionadas à sua rotina na UFABC.

5


PREPARAÇÃO PARA A COLETA

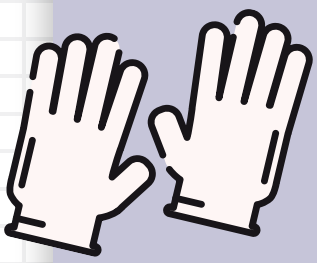

1) Vista o par de luvas disponibilizadas no kit.
2) Abra o tubo de coleta e deixe a tampa virada para cima.
3) Abra o saquinho contendo os algodões.

6


COLETE A SALIVA

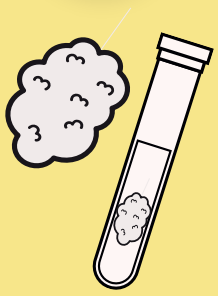

1) Ainda de luvas, leve um algodão à boca e mantenha-o embaixo da língua até que ele fique embebido em saliva.
2) Retire-o da boca e coloque-o dentro do tubo de coleta. Feche-o. Higienize o tubo da coleta com um lenço com álcool 70%.
3) Coloque o tubo de coleta dentro do envelope novo.

7

DESCARTE

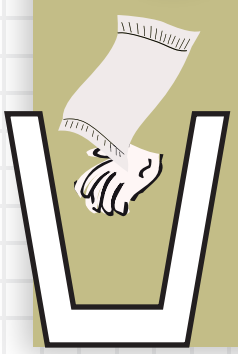

Descarte todos os materiais em lixo comum do banheiro mais próximo e higienize suas mãos e o local da coleta.

8



DEVOLUÇÃO DO TESTE

Lacre o envelope. Agora ele está pronto para ser devolvido!
Vá até um posto de devolução e deposite o envelope.

Caso ocorra algum problema com o seu teste, descarte-o imediatamente. Retire um novo kit e recomece a sua testagem.

Dúvidas: ufabc.net.br/contatotestagem

Núcleo de Monitoramento e Testagem

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR:

UFABC